


USAR UN NEBULIZADOR CON BOQUILLA

Un nebulizador convierte la medicina en un rocío que se puede inhalar profundamente. Los nebulizadores son usados cuando una persona con asma tiene problemas para usar un inhalador de dosis fija o medida. Algunas medicinas pueden mezclarse y ser administradas en un nebulizador - verifique con su doctor.




1: PREPARAR

Ponga la medicina en el recipiente del nebulizador y tápelo.

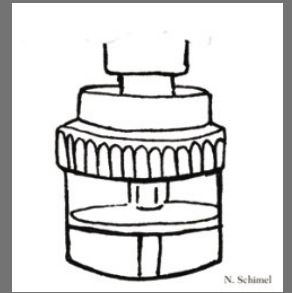


2: UNIR PIEZAS

Ponga la pieza T encima del recipiente del nebulizador. Conecte la boquilla en una punta de la pieza T y el tubo corrugado en el otro extremo de la pieza T.

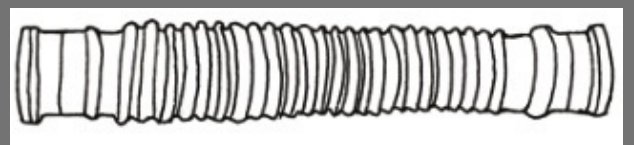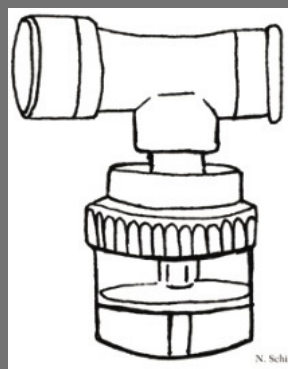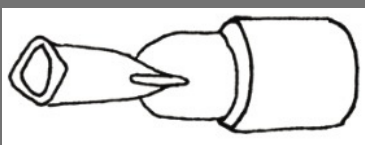

3: CONECTAR EL TUBO

Conecte un extremo del tubo transparente y delgadito a la base del recipiente del nebulizador y el otro extremo a la máquina nebulizadora.


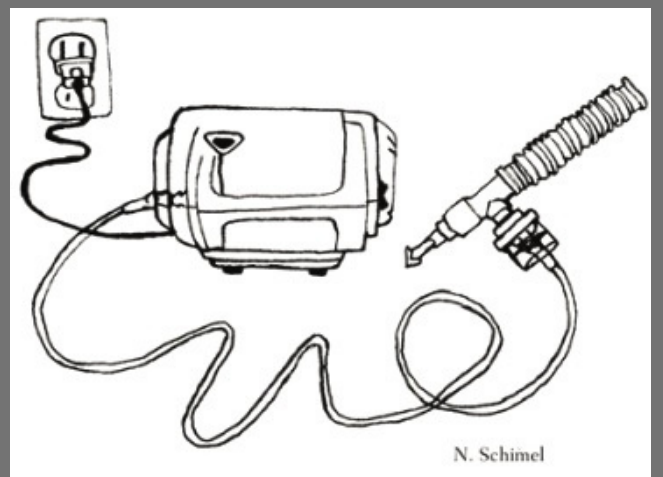


4: EMPEZAR

Haga que la persona se sienta bien erguida.

Colóquele la boquilla en la boca, entre los dientes y cierre los labios.

Encienda la máquina.

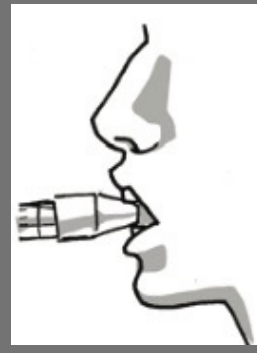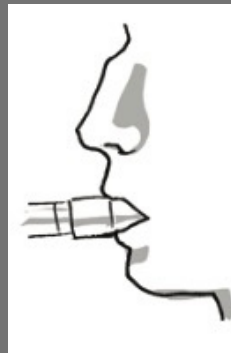

Respire lentamente por la boca y luego exhale por la boquilla. El tratamiento se realiza cuando se acaba todo el medicamento y no hay más niebla. Golpee ligeramente el costado del recipiente para forzar el paso del medicamento.

DESPUES DE USAR UN NEBULIZADOR CON BOQUILLA

ENJUAGAR Y ESCUPIR



LIMPIAR Y DESINFECTAR

¡No remoje, lave o enjuague el tubo delgado o la máquina!

Limpiar después de cada uso: Lave la taza de medicamento, la pieza en T y el tubo arrugado con agua jabonosa.

Enjuagar con agua y secar al aire.

Desinfecte mensualmente: Mezcle 1 taza de vinagre y 1 taza de agua.

Remoje la taza de medicamento, la pieza en T y el tubo arrugado durante la noche.

Enjuague con agua y seque al aire.

CUIDAR LA MÁQUINA

Limpiar con un paño húmedo según sea necesario

Revise el filtro todos los meses y cámbielo cuando se decolore.

Envíe la máquina a revisión cada 5 años.